




系统实验室通风橱的设计以满足金相实验室要求。

配色方案完全符合我们的实验室家具及所有ATM设备。粉末涂层的实心铝柜耐化学腐蚀，保证使用寿命更长。

模块化设计的系统实验室通风橱符合DIN EN14175的安全法规，因此也适合于其他应用

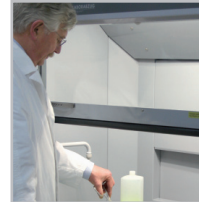

移动门

电子控制移动门自动关闭。在偏离规定的气流的情况下，数显气流监测系统会发出警告声和光纤信号。通风橱带有动作传感器，提高了安全性。

工作表面

带水槽的陶瓷工作表面，有不同尺寸满足最高的要求。也有带有聚丙烯水槽的HPL材质的工作表面，满足基本需求。

基柜

不同的配件，例如防酸柜和防碱柜可以集成在基柜里。

功能

从外面可以控制打开和关闭在内侧的两个集成的插座。工作区配备安全泄压冲击波。
除了水连接，气体和压缩空气接头的可以集成于一体（可选）。也为其他的供应线设计了接入点。

安装预知

通风橱运输的时候分为两部分，可以通过所有常规的门。
安装只需要很短的时间。





基本模块

系统实验室通风橱

订货号: M7510000

- » 根据DIN EN14175测试
- » 带数显空气流动监测的封闭系统
- » 复合玻璃材质的移动门, 可自动关闭
- » 方便观察的集成控制面板
- » 两个集成的插座可从外面切换
- » 照明模块与冲击波安全泄压
- » 铝质机架, 粉末涂层

设备

电源 (可选)

设备 1

230 V/50 Hz (1/N/PE)
Order No.: A7510001

设备 2

110 V/60 Hz (1/N/PE)
Order No.: A7510002

控制系统 (可选)

设备 1

气流监控

订货号: A7510010

- » 带光学和声学信号的数显空气流量监测

设备 2

自动气流控制

订货号: A7510011

- » 带光学和声学信号的数显空气流量监测, 自动控制

移动门 (可选)

设备 1

手动移动门

订货号: A7510015

设备 2

电动移动门

订货号: A7510016



设备

工作表面 (可选)

设备 1
不带水槽的HPL工作表面
订货号: A7510020

设备 2
带水槽的HPL工作表面
订货号: A7510021

设备 3
带水槽的陶瓷工作表面
订货号: A7510022



基柜 (可选)

设备 1
橱柜
订货号: A7510031
» 2个储藏室



设备 2
防酸橱柜
订货号: A7510032
» 两个储存室
» 2层PVC收集托盘
» 带排气管道

选配


外界接入 (可选)

» 外界接入
设备 1
水
订货号: A7510040

设备 2
压缩空气
订货号: A7510041

设备 3
气
订货号: A7510042

技术参数

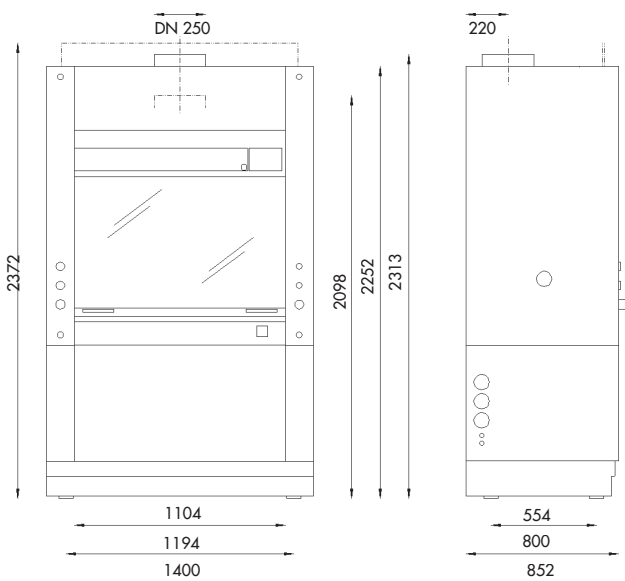

移动门	
移动门打开	500 mm
最大移动门打开	650 mm
工作空间 宽x高x深 1300x700x630 mm	
重量	大约280 kg

